

IV スリーワンモーター BL / BLh / BLW / EP700



BL、BLh



BLW



EP

※改良により写真と異なる場合がございます。

■ BL / BLh / BLW シリーズ共通仕様

回転制御	フィードバック制御・正転／逆転切換え（タイマーモード、手動）
正逆転タイマー	5, 10, 20, 30, 45, 60sec 設定切換え可能
パネル表示	回転数デジタル 4 桁・過負荷表示 トルクインジケーター（1 目盛り 20%）
電源コード	2 極接地型プラグ付電源コード 2m
付属品	クランプホルダー（Type：21×16）1 個

■ ラインアップ

型番	モーター	チャック	回転数(rpm)	定格トルク	価格
BL 300	DC ブラシレス40W	手締め Φ 8	5～300	1.3N・m	138,000
BL 600			10～600	0.7N・m	138,000
BL1200			20～1200	0.3N・m	138,000
BLh 300	DC ブラシレス80W	手締め Φ 8	5～300	2.6N・m	198,000
BLh 600			10～600	1.3N・m	198,000
BLh1200			20～1200	0.6N・m	198,000
BLW 300	DC ブラシレス120W	ドリル Φ 13	5～300	4.5N・m	380,000
BLW 600			10～600	2.2N・m	380,000
BLW1200			10～1200	1.2N・m	380,000

※価格には、シャフト、羽根、スタンドは含まれていません。資料請求してください。

● 完全防爆エアーモーター攪拌機 EP

完全防爆仕様のエアーモーターです。

ニードルバルブでエアーの流量を調整し回転数、トルクを制御します。溶剤に強いステンレス式ドリルチャックです（シャフト径 Φ 8 まで）。オイルレスでの使用も可能です。

型番	回転数	最大推奨回転数	定格トルク
EP 200	約 50 ～ 190rpm	140rpm	2.6N・m
EP 400	約 100 ～ 400rpm	280rpm	1.3N・m
EP 700	約 200 ～ 700rpm	500rpm	0.7N・m
EP1800	約 500 ～ 1800rpm	1300rpm	0.2N・m

エアー最大消費量	400L / min
付属品	チャックハンドル、安全カバー、クランプホルダー サイレンサー兼オイルミスト分離器、エアーフィルター、レギュレーターセット
オプション	組み立てスタンド Type：CS、攪拌シャフト、攪拌翼
価格	428,000円

IV 攪拌機 + MS シール + ヘルール MSMS シリーズ

スリーワンモーターに攪拌シールと接続ヘルールフランジをセットした攪拌機です。



MSMS-BL、BLh



MSMS-BLW



MSMS-EP

防爆エアーマーター攪拌機

■ ラインアップ

型番	付属攪拌羽根	専用シャフト	シャフト（下部）	価格
MSMS-BL300	傾斜パドル Φ 100	Φ 8 300m	Φ 8 300mm	282,000
MSMS-BL600	傾斜パドル Φ 80	Φ 8 300mm	Φ 8 300mm	282,000
MSMS-BLh300	傾斜パドル Φ 120	Φ 8 300mm	Φ 8 300mm	351,000
MSMS-BLh600	傾斜パドル Φ 100	Φ 8 300mm	Φ 8 300mm	351,000
MSMS-BLW300	傾斜パドル Φ 120（2枚）	Φ 12 400mm	Φ 12 400mm	686,000
MSMS-BLW600	傾斜パドル Φ 120（2枚）	Φ 12 400mm	Φ 12 400mm	686,000
MSMS-EP200	傾斜パドル Φ 120	Φ 8 300mm	Φ 8 300mm	603,000
MSMS-EP400	傾斜パドル Φ 100	Φ 8 300mm	Φ 8 300mm	603,000
MSMS-EP700	傾斜パドル Φ 80	Φ 8 300mm	Φ 8 300mm	603,000
MSMS-Ex300	傾斜パドル Φ 120	Φ 8 300mm	Φ 8 300mm	727,000
MSMS-Ex600	傾斜パドル Φ 100	Φ 8 300mm	Φ 8 300mm	727,000


■ 攪拌シール仕様

温度	10℃～100℃
圧力	－0.1MPa～0.19MPa
接続	ヘルール 2s

※ シャフトは、専用シャフト（8mm-3/100,12mm-3/100）を使用してください。
その他の長さのシャフトも用意しています。

※ 専用シャフトの抜き挿しはMSシール内部部品損傷の原因になる為お控えください。

洗浄方法

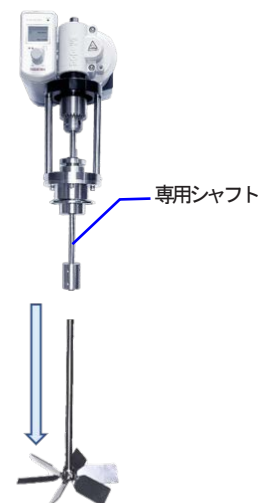

[洗浄]

カップリングからシャフト（下部）、羽根を取り外して洗浄できます。